

SYSTEM DELTA 30
LABOREINRICHTUNGEN | MEDIENSÄULE





Technik und Ästhetik
mit System





Individuell
konfigurierbar
für jede Anforderung



Das ideale Installationskonzept für Open Space Labore

Die Arbeitsumgebungen von heute sind im stetigen Wandel, da Technologien, Methoden und Geräte sich weiterentwickeln. Somit bedarf es an vielen Standorten einem Einrichtungskonzept, welches auf diese Veränderungen eingehen kann.


Mit der Mediensäule haben wir ein Produkt geschaffen, dass maximale Flexibilität für die Laborumgebung zulässt und individuell, je nach Anforderung, mit den notwendigen Medien bestückt werden kann. Horizontale, sowie vertikale Geräteanordnungen sind somit im gesamten Labor möglich. Zudem ist das System kombinierbar mit allen Arbeitstischen.




Produktvorteile

- Transparentes, offenes und technisch hochwertiges Design
- Solide Ausführung
- Sehr schlanke Bauform, Kassetten werden nur gesetzt, wo Medien gebraucht werden
- Für die Decken- oder Wandmontage
- Zwischen jeweils zwei Mediensäulen können Hängeschränke und Ablagen montiert werden – das schafft zusätzlichen Stauraum
- Aufnahme für Zubehör wie DELTAup über die Funktionsnut
- Einfaches und kostengünstiges Um- oder Nachrüsten von Laborräumen mit Deckengrid
- Einfaches und kostengünstiges Um- oder Nachrüsten von Medien in der Säule

Ausstattungsvariante Decke

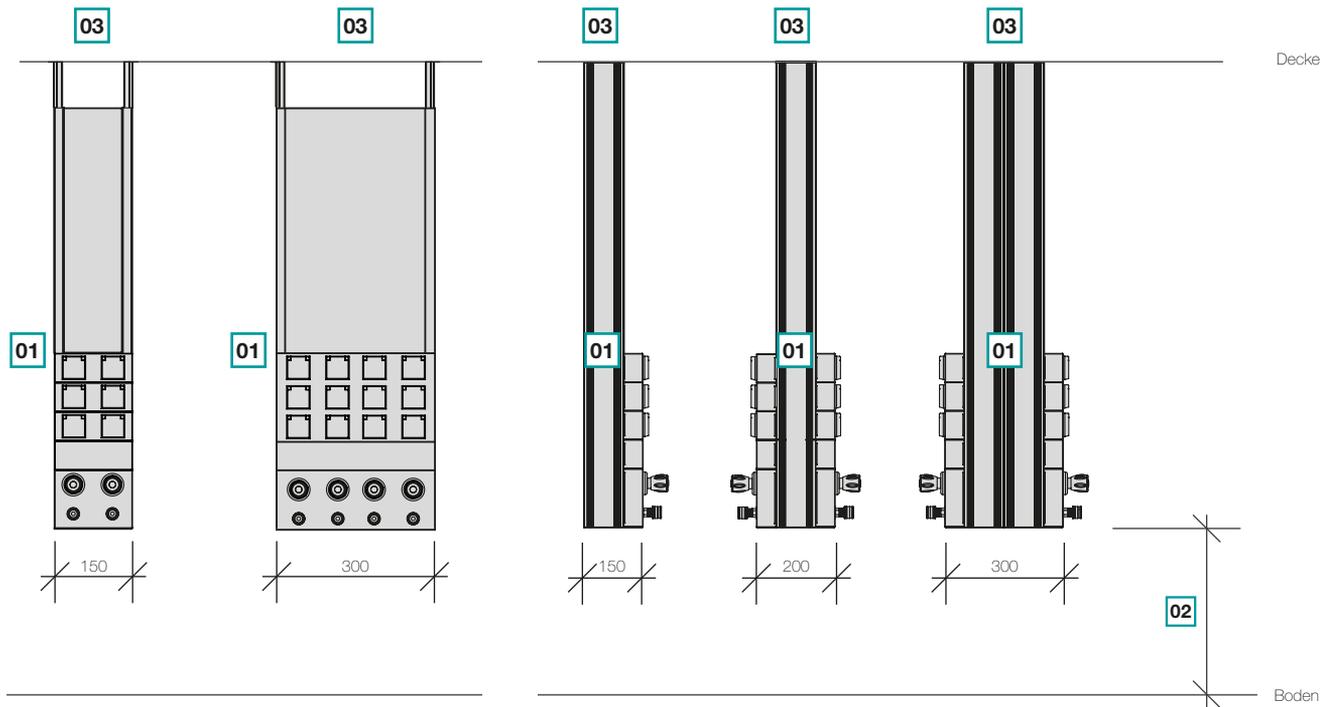

Ausstattungsvariante Wand

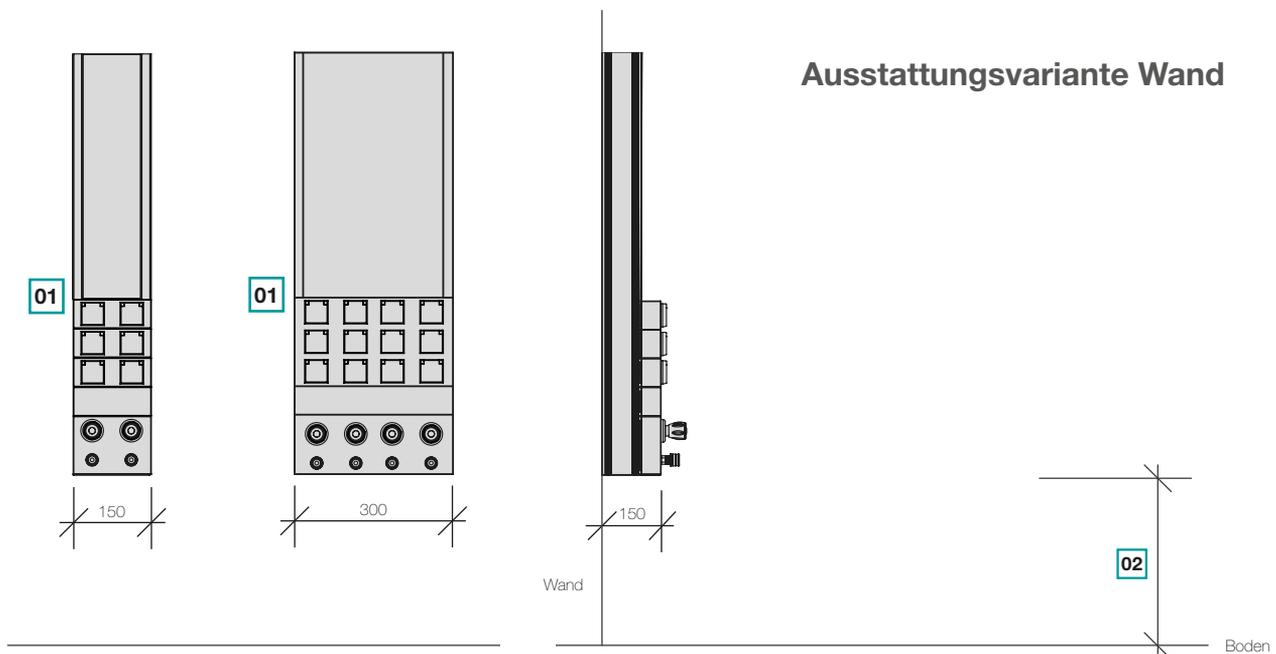

01 Blenden für Elektrobestückung und Entnahme (Eck- oder Frontbedienventile)

02 Montagehöhe nach Anforderung

03 Deckenanbindung nach Anforderung

- **Optionen:** An den Grundmodulen können optional folgende Elemente befestigt werden:
 - Hängeschrank
An Montageschienen zwischen zwei Säulen können Hängeschränke montiert werden. Die Montageschienen werden dazu in den Funktionsnuten befestigt.
 - Zubehör
Ein Monitorhalter wie auch das DELTAup-Zubehör kann in den Funktionsnuten befestigt werden.

Ablage

Zwischen die Säulen können Ablageebenen mit einer Tiefe von 200, 300 und 400 mm positioniert werden. Die gekanteten Stahlbleche (2 mm) werden in den Funktionsnuten befestigt. Die Ablageebenen haben seitlich eine 25 mm hohe Aufkantung, zwischen die Böden aus z.B. Glas, Vollkern oder melaminharzbeschichtete Spanplatte eingelegt werden. Die Ablagen sind stufenlos in der Höhe einstellbar. Es können mehrere Ablagen übereinander positioniert werden.

www.wesemann.com

Wesemann GmbH

Max-Planck-Straße 15-25
28857 Syke
Germany

Fon: +49 (0) 42 42 594-0
Fax: +49 (0) 42 42 594-333
E-Mail: info@wesemann.com

